




DISTRILASER

L'EXCELLENCE MÉDICALE À VOTRE SERVICE

MATÉRIEL MÉDICAL

www.distrilaser.com

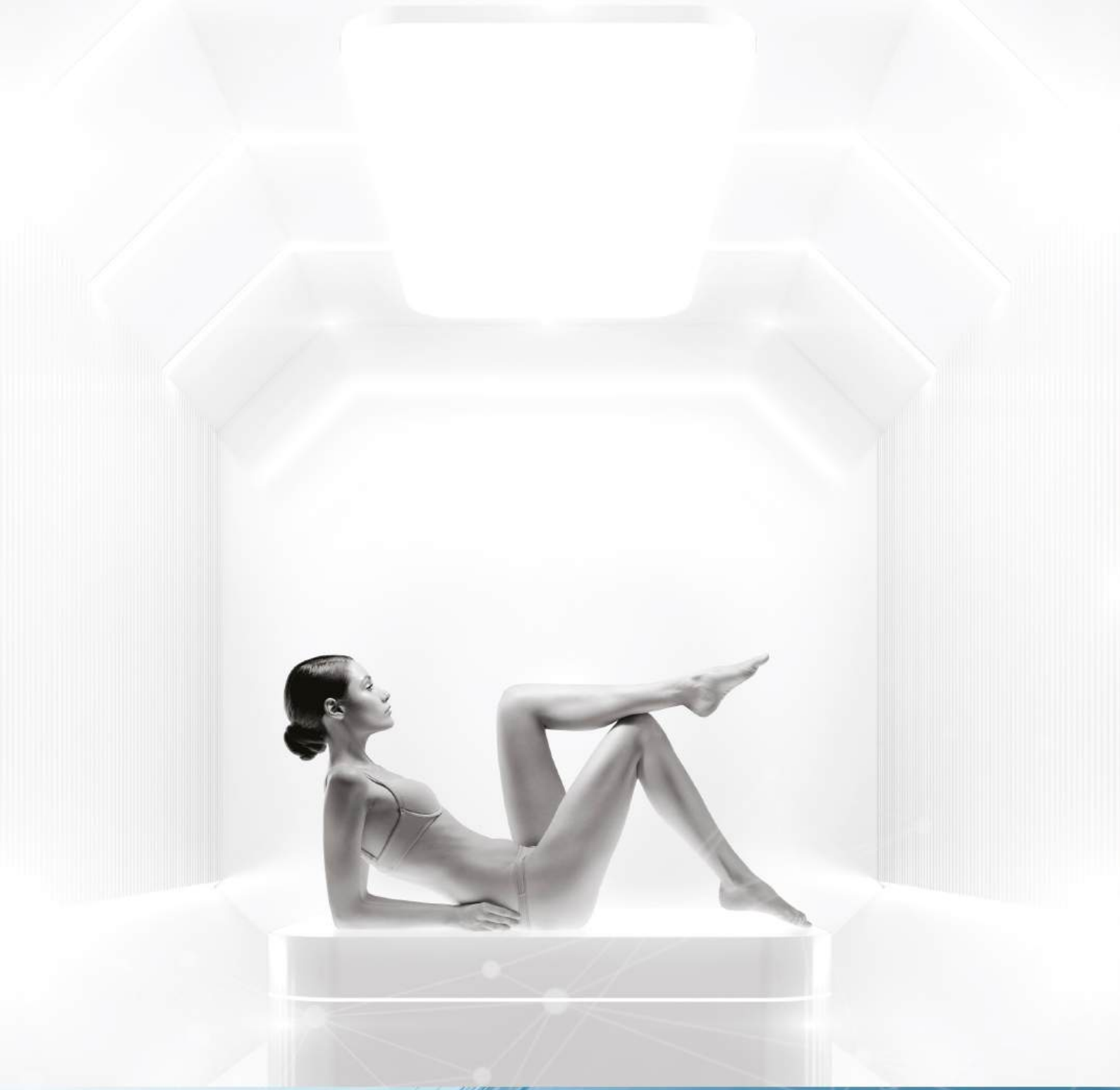

SOMMAIRE

P.04 SILKLASE™

P.14 LYSIWAVE

P.06 ENDOLIFT®

P.16 CRYOLIPOSCULPT

P.08 LASEMAR® 500

P.18 KITS PRP

P.10 CFU-ELIFE®

P.20 GAMME SEFFILINE

P.12 COAXMED ONE

P.22 ACCOMPAGNEMENT

DISTRILASER

L'EXCELLENCE MÉDICALE AU SERVICE DE VOS TRAITEMENTS MÉDICO-ESTHÉTIQUES

Grâce à une gamme complète de solutions innovantes dédiées à la médecine esthétique et à la médecine régénérative, Distrilaser vous accompagne à chaque étape : conseil, installation, formation et suivi.

Toutes nos technologies sont rigoureusement testées et validées par un comité de médecins référents, afin de vous garantir uniquement les dispositifs les plus performants et sécurisés.

Fort de plus de 20 ans d'expertise dans le domaine, Pierre Simoncini et son équipe sont les partenaires de confiance des professionnels exigeants : dermatologues, gynécologues, chirurgiens et ophtalmologues.



UNE EXPERTISE AU SERVICE DE VOS PROJETS

Fort de son expérience, Distrilaser s'est imposé grâce à l'excellence de ses technologies et à un accompagnement personnalisé, plaçant chaque client au cœur de ses priorités.

Notre mission : vous faire découvrir les dernières innovations et vous offrir une formation complète pour une maîtrise optimale de chaque technologie, dès leur acquisition.

Entreprise familiale fière de ses valeurs et de son histoire, Distrilaser cultive des relations humaines fortes, fondées sur le professionnalisme, la proximité et la recherche constante de performance.

Notre équipe soudée, disponible et experte est à votre écoute pour vous conseiller et vous accompagner dans le développement et la réussite de votre activité.

LES INDICATIONS

DERMATOLOGIE

- KÉRATOSES ACTINIQUES
- KÉRATOSES SÉBORRHÉIQUES
- CONDYLOMES ET VERRUES
- RHINOPHYMAS
- XANTHÉLASMAS
- CICATRICES FIBREUSES

ESTHÉTIQUE

- RESURFAÇAGE
- RIDES, RIDULES
- CICATRICES D'ACNÉ
- BLÉPHAROPLASTIES
NON CHIRURGICALES



INTERmedic
laser & light solutions

FLASHEZ-MOI
(PLUS D'INFOS)



SILKLASE™

LE COUTEAU SUISSE DU LASER CO2 MÉDICAL

SILKLASE™


Le Laser CO2 pour la dermatologie & la blépharoplastie médicale Silkplex™

SILKLASE™ est une plateforme laser polyvalente, capable de réaliser aussi bien des traitements superficiels doux que des procédures plus profondes. Conçue pour exciser, inciser, vaporiser et coaguler sans carbonisation, elle s'adapte aux exigences de nombreuses spécialités médicales et chirurgicales.


Équipée du scanner MultiScan™, technologie de pointe à émission randomisée, elle permet un contrôle précis de la profondeur, de la surface traitée et de l'effet thermique, garantissant des résultats sûrs et performants.

SILKLASE™ redéfinit les standards en dermatologie, médecine esthétique, ophtalmologie et ORL, avec une efficacité optimale, sans compromis sur la sécurité.

Laser CO2 (10 600 nm)
traitement superficiel
spot 500 µm

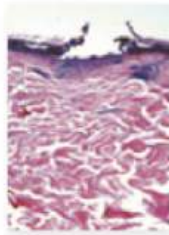

Laser CO2 (10 600 nm)
traitement profond
spot 190 µm

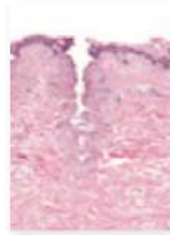

AVANT/APRÈS



Dr. Boire



Dr. Ackermann



Dr. Boire

LE KIT SILKPLEX™ POUR LA BLÉPHAROPLASTIE MÉDICALE AU LASER CO2



LES ACCESSOIRES

- 2 pièces à main chirurgicales : focale 50 - focale 100
- 1 pièce à main fractionnée 190 µm
- 1 pièce à main fractionnée 500 µm
- 1 pièce à main fractionnée 500 µm - Optilift
- 1 pièce à main fractionnée sub-ablative : 800 µm - Sweet-touch

LES INDICATIONS

RETENSION CUTANÉE VISAGE

- CONTOUR MANDIBULAIRE
- ZONE SOUS-MENTONNIÈRE
- JOUES
- COU

RETENSION CUTANÉE CORPS

- ABDOMEN
- CUISSSES
- BRAS
- GENOUX

LIPOSUCCION ASSISTÉE

- VISAGE & CORPS



EUFOTON
medical lasers



LASEmar[®] 1500
ENDOLIFTX[®]

FLASHEZ-MOI
(+ D'INFOS)



RAFFERMIR & SCULPTER SANS CHIRURGIE



La technique laser révolutionnaire pour un raffermissement durable de la peau, sans chirurgie

Le LASEmaR® 1500 est une technologie de médecine esthétique utilisant un laser diode 1470 nm pour traiter le relâchement cutané et stimuler la production de collagène.

Grâce à des microfibres optiques ultra-fines, insérées sous la peau sans incision, le laser agit en profondeur pour raffermir et redessiner les contours du visage et du corps. Sa longueur d'onde cible sélectivement l'eau des tissus, garantissant une action efficace, peu invasive et avec un temps de récupération minimal.

EndoliftX® est une alternative innovante à la chirurgie, avec des résultats visibles et naturels en une seule séance.



LES AVANTAGES

- TECHNIQUE ANTI-ÂGE AMBULATOIRE ;
- COMPLÉMENTAIRE AVEC D'AUTRES TRAITEMENTS ;
- UNE SEULE SÉANCE ;
- TOUS PHOTOTYPES ;
- PAS D'ÉVICTION SOCIALE, NI SOLAIRE ;
- EFFETS DURABLES DANS LE TEMPS.

Centre Regeneva



Dr Fayard



Dr Dini



LE FRACTIONNÉ NON ABLATIF LIGHTSCAN™ 1500

permet le rajeunissement de la peau grâce à la technologie fractionnée LIGHTSCAN™, indiqué pour :

- Rides du visage
- Cicatrices
- Vergetures
- Lésions pigmentaires et séniles
- Retension et raffermissement de la peau
- Pores dilatés, cicatrices d'acné



LES INDICATIONS

- LÉSIONSVASCULAIRES
- LÉSIONS PIGMENTAIRES
- LÉSIONS BÉNIGNES
- CHÉLOÏDES ET VERGETURES
- PHOTORAJEUNISSEMENT

CE
0476

EUFOTON
medical lasers



FLASHEZ-MOI
(+ D'INFOS)



LASEmaR® 500

LE KTP QUI GOMME LES LÉSIONS VASCULAIRES ET PIGMENTAIRES

LASEMAR®500

Le laser KTP 532 nm pour les rougeurs et taches pigmentaires

Le LASEmaR® 500 est un KTP qui permet de traiter les lésions vasculaires et pigmentaires par photothermolyse ou par photocoagulation en fonction du paramétrage sélectionné. L'utilisation de temps de tirs très courts permet d'avoir une action de photothermolyse, ce qui induit l'éclatement du vaisseau sous l'effet de la chaleur. Les durées d'impulsions plus longues, quant à elles, ont un effet de photocoagulation des vaisseaux avec très peu d'effets secondaires. Intuitif et simple d'utilisation, le LASEmaR® 500 est un outil du quotidien efficace pour tout soin dermatologique.

LES AVANTAGES

- TECHNIQUE AMBULATOIRE ;
- TRAITEMENTS PRÉRÉGLÉS ET AJUSTABLES ;
- INTUITIF ET SIMPLE D'UTILISATION ;
- POLYVALENCE DES TRAITEMENTS ;
- COMPACT ET TRANSPORTABLE ;
- FINE PRÉCISION DU RÉGLAGE DE LA TAILLE DE SPOT DE 0, IMM EN 0, IMM (DE 0,5 À 2 MM).


Lésions vasculaires
AVANT/APRÈS



Cicatrice
AVANT/APRÈS



Lésions pigmentaires
AVANT/APRÈS

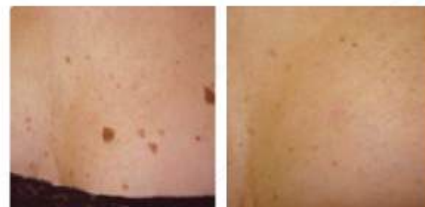

Chirurgie dermatologique
AVANT/APRÈS



Traitement avec scanner
AVANT/APRÈS

LE LIGHTSCAN™ 500 EN COMPLÉMENT

Le scanner fractionné permet de traiter les indications vasculaires étendues (angiomes plans et taches de vin) et dermo-esthétiques (photorajeunissement, rides fines, pigmentation épidermique, pores dilatés, vergetures rouges, cicatrices chéloïdes, acné en phase active).



LES INDICATIONS

- RELÂCHEMENT CUTANÉ DE L'ENSEMBLE DU VISAGE (SURTOUT OVALE)
- RÉDUCTION DU DOUBLE MENTON ET DES BAJOUES
- RELÂCHEMENT CUTANÉ DU COU ET DU DÉCOLLETÉ
- TRANSPIRATION EXCESSIVE

CE
1370



biotec Italia
Medical



FLASHEZ-MOI
(DÉMO VIDÉO)



CFU-Èlife

LES ULTRASONS FOCALISÉS POUR CIBLER LE SMAS

biotec italia

cfu-èlife

**La seule technologie HIFU sans consommables
et confortable pour le patient**

Dernière technologie d'HIFU, le CFU-Èlife permet de manière sûre, efficace et non invasive de retendre la peau du visage et du cou ainsi que de redessiner la silhouette.

Le CFU-Èlife délivre avec précision l'énergie des ultrasons focalisés à haute fréquence (HIFU) vers l'épiderme, le derme, le tissu adipeux superficiel et profond et le SMAS permettant ainsi un effet tenseur.

Par rapport aux HIFU traditionnels, CFU-Èlife réduit considérablement la durée du traitement grâce à l'utilisation de la nouvelle méthode EASYFLOW et module la fréquence d'émission des ultrasons jusqu'à 10 Hz.

Les technologies CENTERLESS, CFU EASYZOOM et EASYFLOW, combinées à une capacité d'impulsion ultra rapide et à un système de refroidissement ACE, font de CFU-Èlife une technologie unique sur le marché de la médecine esthétique.

LES AVANTAGES

- PAS DE CONSOMMABLE ;
- PEU DE CONTRE-INDICATIONS ;
- PAS D'ÉVICTION SOLAIRE NI SOCIALE ;
- PIÈCES À MAINS DE 10 MILLIONS DE TIRS ;
- TOUS PHOTOTYPES ;
- VISAGE ET CORPS.



AVANT/APRÈS



AVANT/APRÈS



AVANT/APRÈS



AVANT/APRÈS



AVANT/APRÈS



AVANT/APRÈS

LES INDICATIONS

- RIDES, RIDULES
- PORES DILATÉS
- TONIFICATION CUTANÉE
- ÉCLAT DU TEINT
- CICATRICES
- VERGETURES

CE
1370



FLASHEZ-MOI
(DÉMO VIDÉO)



COAXMED ONE

LA TECHNOLOGIE INCONTOURNABLE POUR L'ANTI-ÂGE

biotec italia

coaxmed

La plateforme qui combine radiofréquence
monopolaire, bipolaire & méso-needling

La plateforme COAXMED ONE combine plusieurs technologies : radiofréquence monopolaire (Ablaze®), radiofréquence bipolaire et vacuum (Endoshape®), microneedling, vacuum et radiofréquence (SkinTite®).

Elle agit en profondeur pour raffermir la peau, stimuler la production de collagène et réduire le relâchement cutané.

Une technologie non invasive, agréable pour les patients et compatible avec tout phototype.

3 TECHNOLOGIES :

ENDOSHAPE®

Radiofréquence bipolaire
+ vacuum




ABLAZE®

Radiofréquence monopolaire



SKINTITE®

Méso-needling
+ RF monopolaire

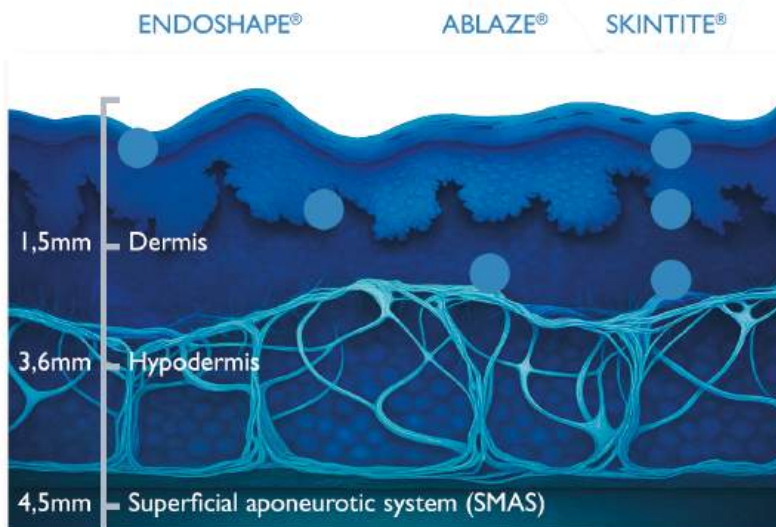

AVANT/APRÈS



AVANT



APRÈS



LES INDICATIONS

- RÉDUCTION DE LA CELLULITE ET DE L'EFFET PEAU D'ORANGE
- CELLULITE DOULOUREUSE
- ÉLIMINATION DES AMAS GRAISSEUX LOCALISÉS
- RAFFERMISSEMENT CUTANÉ CORPS
- REMODELAGE DE LA SILHOUETTE

CE
1370



FLASHEZ-MOI
(DÉMO VIDÉO)



LYSIWAVE

LES MICRO-ONDES ET L'OXYGÈNE PUR POUR LE REMODELAGE CORPOREL

lysiwave

La dernière avancée technologique pour le traitement de la cellulite et de la graisse

Lysiwave, grâce à la technologie des micro-ondes et de l'oxygène pur, permet de :

- pénétrer profondément dans les membranes cellulaires des cellules graisseuses sous-cutanées pour éliminer l'adiposité localisée ;
- stimuler le tissu conjonctif entourant les lobules adipeux pour atténuer l'aspect «peau d'orange» ;
- provoquer la contraction des fibres de collagène pour stimuler la production de nouveau collagène, raffermir et tonifier les tissus.



APPLICATEUR LD

Concentre sélectivement l'activité diélectrique des micro-ondes agissant à 2,45 GHz à la surface de la peau provoquant ainsi la contraction des fibres de collagène, le raffermissement et la tonification des tissus.



APPLICATEUR HD

Conçu pour contourner les couches plus superficielles de la peau et agir en profondeur, il fournit plus d'énergie diélectrique aux cellules adipeuses pour traiter la cellulite profonde et favoriser l'élimination des graisses.



OPTION COOLAIR LD

Permet d'administrer un mélange d'air et d'oxygène pur à 90% pour améliorer la micro-circulation et réactiver le métabolisme cutané. Le flux d'air constant protège la peau, retardant la migration de la chaleur vers sa surface.



SENSEUR THERMIQUE

Le capteur de température situé sur la pièce à main contrôle dynamiquement l'échauffement superficiel et désactive l'émission de micro-ondes lorsque la température de la peau dépasse 41°C.

LES AVANTAGES

- PAS DE CONSOMMABLE ;
- APPLICATEURS À ÉMISSION LINÉAIRE ET FOCALISÉE ;
- SENSEUR THERMIQUE ;
- CONSOLE SIMPLE ET INTUITIVE ;
- FLUX D'OXYGÈNE RÉGÉNÉRANT ;
- REFROIDISSEMENT DE LA PEAU.



Dr Boire



Centre Laser L'Étoile



Dr Boire



Dr Boire

LES INDICATIONS

- ÉLIMINATION DES AMAS GRAISSEUX LOCALISÉS

CE
1370



FLASHEZ-MOI
(DÉMO VIDÉO)



CRYOLIPOSCULPT

L'ÉVOLUTION DE LA CRYOLIPOLYSE

cryoliposculpt

Le froid intense et les microcourants pour les adiposités localisées

Cryoliposculpt est une méthode brevetée de remodelage corporel, basée sur le processus de refroidissement des adipocytes et sur l'effet bénéfique des champs électromagnétiques, qui permettent de réduire définitivement l'excès de graisse. En fonction de la localisation et de l'épaisseur de la graisse sous-cutanée, quatre applicateurs de taille moyenne peuvent être utilisés simultanément. L'aspiration constante de la zone ciblée entre deux plaques préserve la micro-circulation cutanée, assurant un confort optimal au patient.

LES AVANTAGES

- REFROIDISSEMENT CONTRÔLÉ À -10°C ;
- CHAMP ÉLECTROMAGNÉTIQUE EN SIMULTANÉ ;
- 4 APPLICATEURS, 4 ZONES TRAITÉES SIMULTANÉMENT ;
- PAS D'ÉVICTION SOCIALE NI SOLAIRE ;
- SÉCURITÉ ET CONFORT DU TRAITEMENT.



AVANT/APRÈS
(Après 60 jours / 1 Session)



AVANT/APRÈS
(Après 60 jours / 1 Session)



LES INDICATIONS

DERMATOLOGIE

- ALOPÉCIE ANDROGÉNÉTIQUE
- TROUBLES DE LA PIGMENTATION

GYNÉCOLOGIE

- TROUBLES DE LA SPHÈRE VULVO-VAGINALE

CE
1370


remedex

FLASHEZ-MOI
(DÉMO VIDÉO)



NATUREL | BIOLOGIQUE | AUTOLOGUE

PRP REMEDEX

LE POUVOIR DES CELLULES



remedex

Le PRP d'excellence

Les plaquettes sanguines sont un formidable réservoir de facteurs de croissance impliqués dans la réparation des tissus du corps humain. Le traitement repose sur une injection de Plasma Riche en Plaquettes autologue dont le volume et la pureté plaquettaire sont standardisés et contrôlés en fonction des indications.

LES AVANTAGES

- PROTOCOLES STANDARDISÉS ;
- STIMULE LA RÉGÉNÉRATION CELLULAIRE ;
- RÉPARE LES TISSUS ;
- ACCÉLÈRE LE PROCESSUS DE GUÉRISON ;
- SANS RISQUE POUR LE PATIENT ;
- RICHE EN FACTEURS DE CROISSANCE.



LE KIT REMEDEX - DISTRILASER

Remedex a sélectionné les meilleurs dispositifs et élaboré des protocoles détaillés pour permettre d'obtenir une pureté plaquettaire et un taux de récupération de plaquettes respectivement supérieurs à 90 % et 80 % lors de chaque préparation.



CONTENU DU KIT PRP :

- 2 kits de prélèvement sanguin
- 2 tubes de PRP
- 2 seringues 10 mL
- 2 aiguilles 14G 40mm
- 2 micro-cannules 18G 90mm

VALORISATION SCIENTIFIQUE

Grâce au logiciel de pilotage vous pouvez suivre les résultats de vos patients, réaliser des statistiques en temps réel et participer à un recensement national des praticiens REMEDEX.

Si vous le souhaitez, vos données sont analysées pour établir un rapport que vous pourrez utiliser comme support pour expliquer le bénéfice des injections de PRP à vos patients ou présenter vos données lors de communications scientifiques.

CHAMPS D'APPLICATION



SEFFILLER®
MÉDECINE ESTHÉTIQUE



SEFFIGYN®
GYNÉCOLOGIE



SEFFIHAIR®
TRICHOLOGIE ET DERMATOLOGIE



SEFFICARE®
MUSCULOSQUELETTIQUE

FLASHEZ-MOI
(DÉMO VIDÉO)



TRAITEZ VOS PATIENTS GRÂCE AU POTENTIEL DE RÉPARATION DU CORPS HUMAIN



LE CONCEPT

LE SYSTÈME DE GUIDAGE BREVETÉ

permet d'administrer la solution anesthésique pour prélever du tissu de manière guidée, sûre, efficace et standardisée.



LA SERINGUE

avec piston auto-bloquant permet de prélever du tissu avec une aspiration douce et non traumatique.




LA CANULE EXCLUSIVE

dérivée de la technique SEFFI*, permet de sélectionner la SVF optimale pour la ré-injection.



LES ÉTAPES

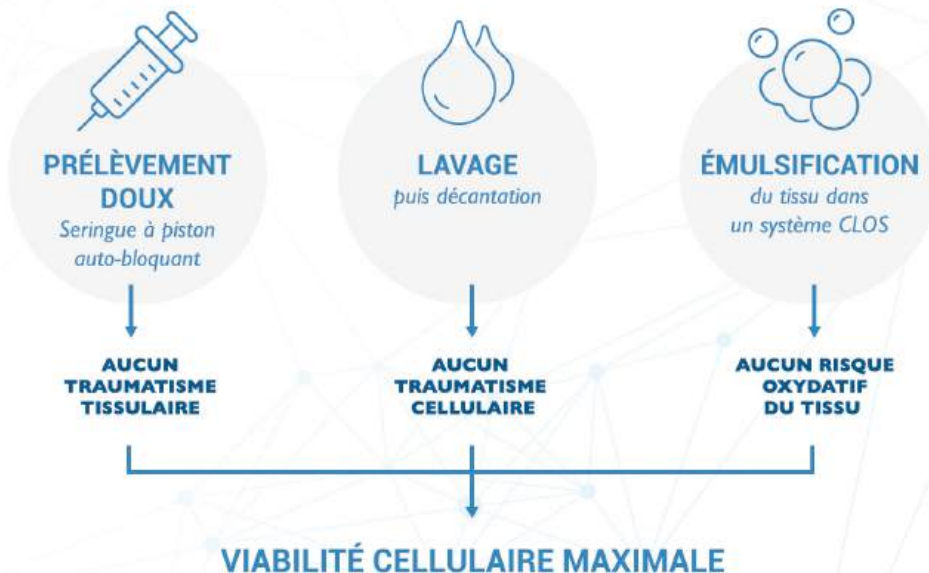

LES AVANTAGES



• **TRAITEMENT AMBULATOIRE**
Quantité minimale d'anesthésie locale (20-30ML)



• **SANS EFFET SECONDAIRE**
Manipulation tissulaire minimale



• **PEU INVASIF**
Quantité minimale de tissu prélevé (10-20ML)



• **RÉCUPÉRATION IMMÉDIATE**
Réinjection tissulaire simple

ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE



**SUPPORTS
VISUELS**



**GROUPE
D'ENTRAIDE**



**RÉSEAUX
SOCIAUX**



ÉVÈNEMENTS



ACCÈS DÉDIÉ

FORMATIONS



**FORMATION
DÉBUTANT & EXPERT**



**USER MEETING
NATIONAL**

SAV




**CONTRAT
DE MAINTENANCE
ANNUELLE**



**INTERVENTIONS
PONCTUELLES**



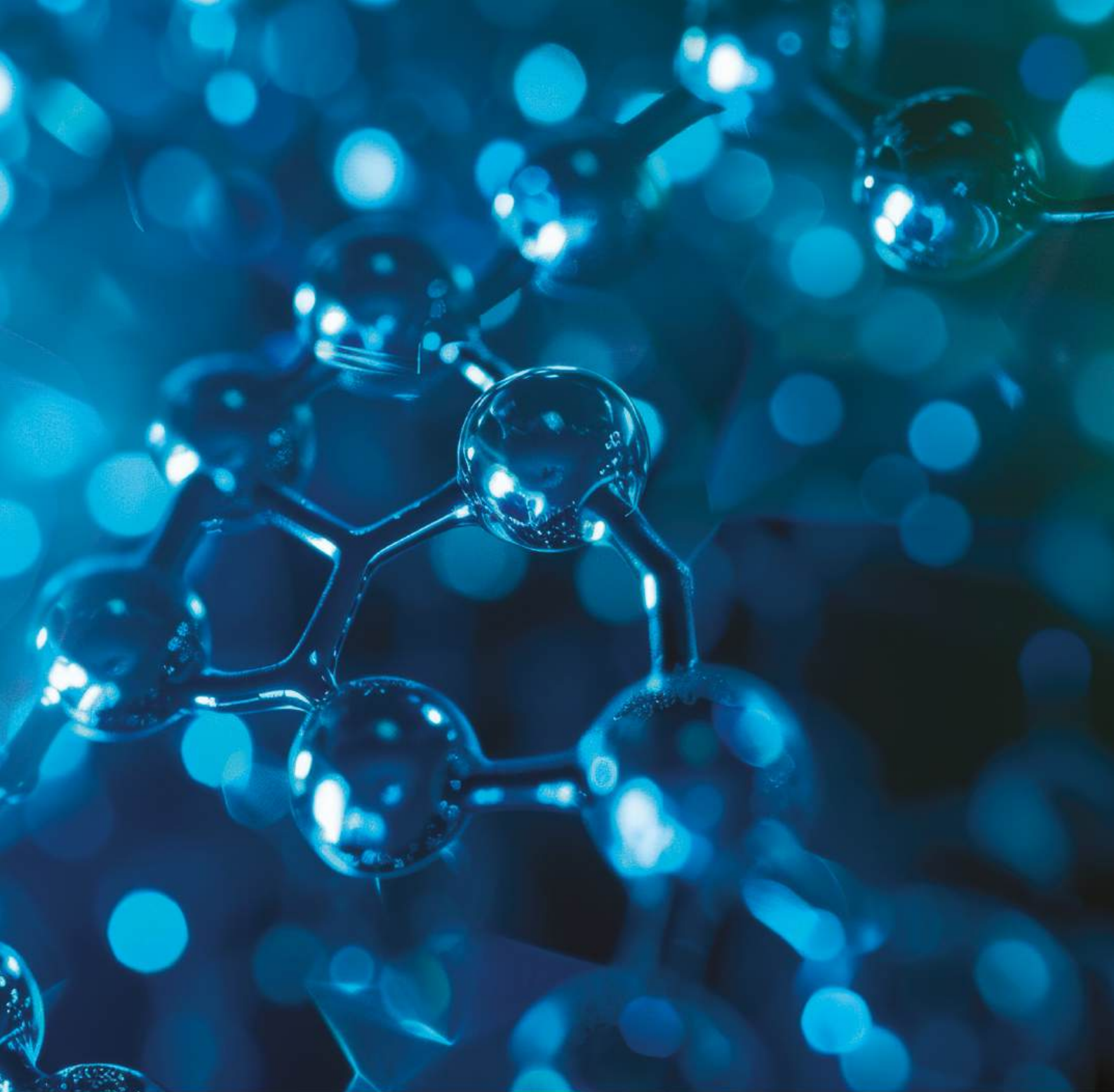

DISTRILASER

L'EXCELLENCE MÉDICALE À VOTRE SERVICE

636 AVENUE DU 8 MAI 1945 • 83470 SAINT-MAXIMIN-LA-SAINTE-BAUME
Tél. : +33 7 83 18 09 05 • E-mail : contact@distrilaser.com • www.distrilaser.com



Dispositifs homologués pour usage professionnel uniquement. Copyright © Distrilaser 2025. Toutes les marques citées sont des marques déposées.
Les logos, photos et visuels appartiennent aux marques respectives. Tous droits réservés. Textes, photos et visuels non contractuels. Image Bank : AdobeStock. Design et impression : www.lencrenoire.com